




MATELAS ESCARRE STADE 1 - MAT1 (ARTICULE)

Chambre médicalisée - Soins Médicaux de Réadaptation (SMR)



Sommaire

HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860	3
Nos engagements	4
Choisir l'économie circulaire	5
Matériaux recyclables	6
Certifications	7
Matelas Hébergement Soins Médicaux de Réadaptation (SMR)	8
Nos points forts	
EasyClean (Configurations dédiées)	10
Facilité de livraison et de stockage (Logistique optimisée)	11
Les caractéristiques	
Fonction(s) Distinctive(s)	13
Surface de couchage	14
Configurable	15
Spécificités techniques	16
Une maintenance préventive qui s'adapte à vous	20
Les avantages de la maintenance préventive	21
Nos prestations de maintenance préventive	22

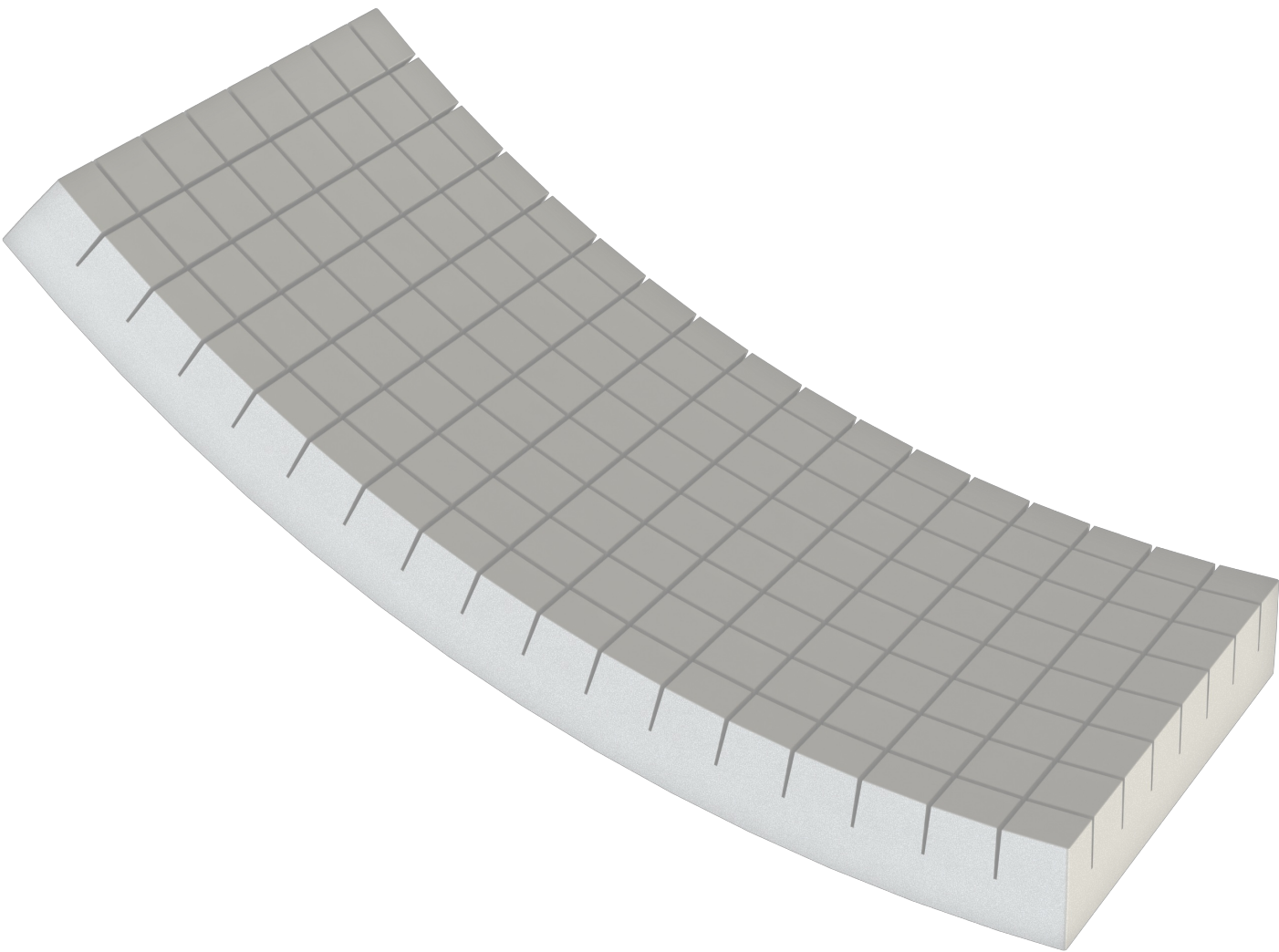



HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.



Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

Nos 6 engagements



Une production Made in France



L'utilisation de ressources renouvelables



Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit



Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)



Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement



Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

Choisir l'économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d'un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l'infini car ses fibres deviennent trop petites ou s'épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.



Le bois de réemploi

Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF. Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.


Un niveau de certification de premier plan



MATELAS HÉBERGEMENT

Soins Médicaux de Réadaptation (SMR)

Escarre stade 1 - MAT1 (ARTICULE)

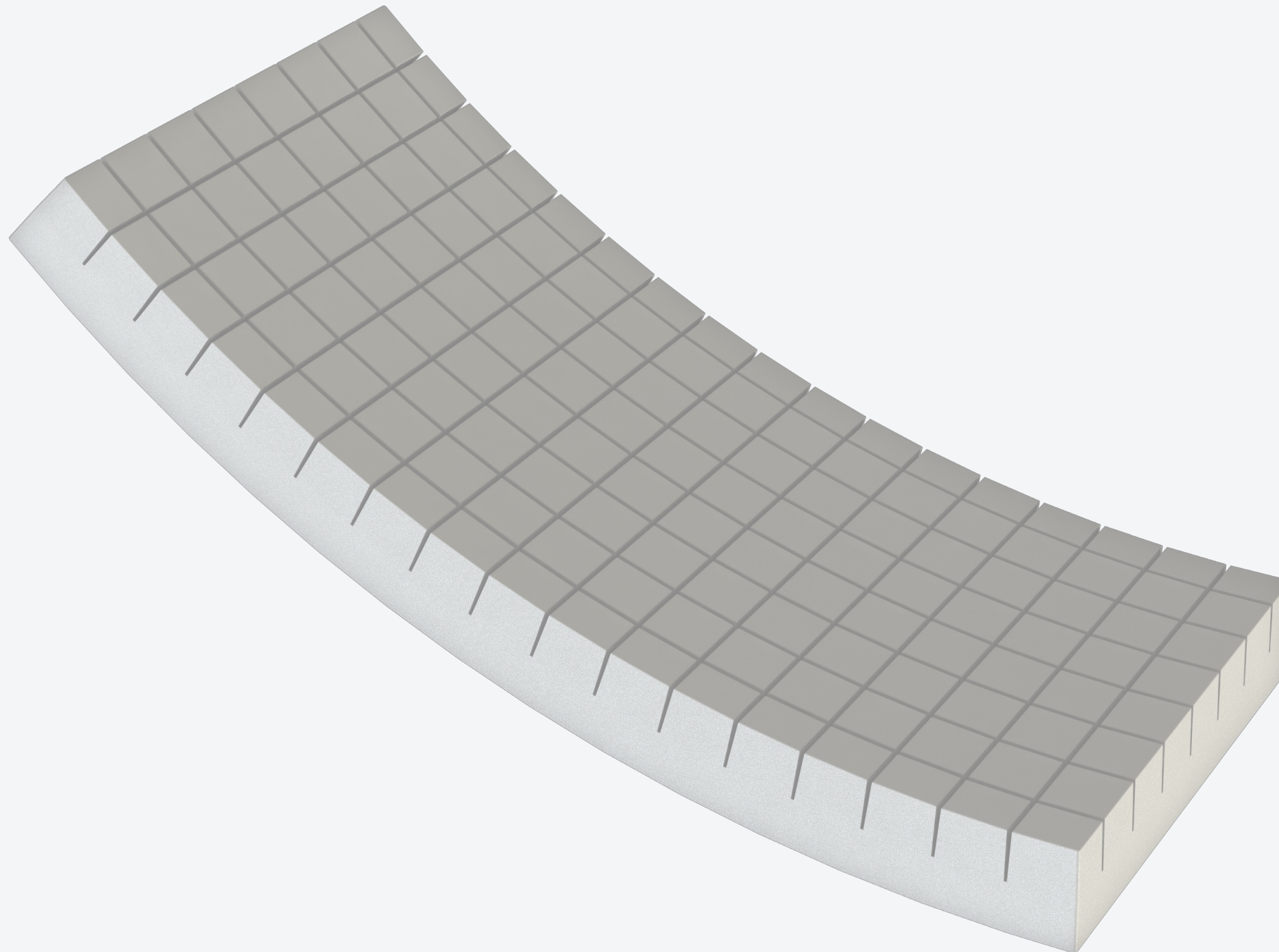



NOS POINTS FORTS



Pensé pour le **confort des patients** et la **sérénité des équipes soignantes**, le concept EasyClean facilite l'entretien au quotidien.

Grâce à sa structure monobloc et à sa **housse intégrale zippée sur trois côtés**, facilement **amovible**, il assure une **manipulation simple et rapide**. Protégées par des **rabats couvrants**, les fermetures évitent toute rétention de poussière ou de liquide.

Cette **conception hygiénique et fonctionnelle** réduit le temps de nettoyage et garantit un environnement plus sain et sûr pour tous.



Nos matelas peuvent être livrés selon **deux modes** pour s'**adapter** à vos contraintes logistiques.


La livraison à plat, **prête à l'emploi**, elle **facilite** la mise en service **immédiate** et le stockage classique.

Ou la livraison compressé qui permet d'**optimiser l'espace**, de **réduire l'encombrement** et de **simplifier** le transport, tout en conservant la **qualité** du matelas.

Ces deux solutions offrent une **flexibilité** maximale, vous permettant de choisir le conditionnement le plus adapté à votre organisation.



LES CARACTÉRISTIQUES

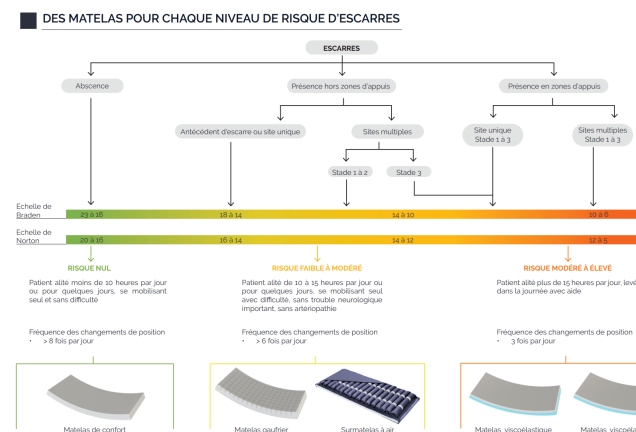


Anti escarres

Les escarres se forment lorsque **la peau et les tissus sous-jacents subissent une pression prolongée**, un cisaillement ou une friction, souvent sur des zones osseuses. **La pression comprime les tissus** et peut provoquer des lésions cellulaires, **le cisaillement déplace les tissus profonds et pince les vaisseaux**, et chaleur ou humidité fragilisent la peau.

Nos matelas gaufré **répartissent les pressions, réduisent le cisaillement et favorisent la ventilation cutanée**.


Ils sont adaptés aux **patients à risque faible à moyen (classe I)**, alités **10 à 15 heures** par jour ou quelques jours, **se mobilisant avec difficulté, sans troubles neurologiques majeurs ni artériopathie**, avec des **changements de position recommandés plus de 6 fois par jour**.

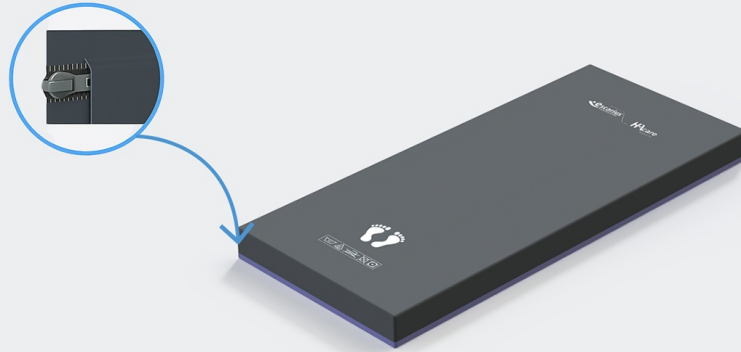

Housse

La housse intégrale, **zippée sur trois côtés et munie de rabats de protection**, facilite la mise en place et le retrait du matelas ainsi que son entretien.

Confectionnée dans un **tissu imperméable et respirant de 150g/m²**, elle favorise l'évacuation de la transpiration et de l'humidité corporelle, contribuant au **confort du patient**. Lavable et séchable en machine, elle est **adaptée aux environnements médicaux** et répond aux exigences de sécurité grâce à son **classement au feu M1**.

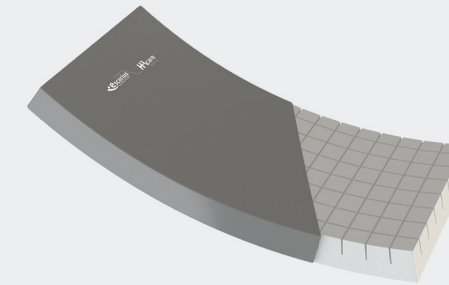


Matelas

La mousse haute résilience (HR) de **35kg/m³**, classée dispositif médical de **classel**, combine **soutien ferme et confort durable**.

Sa densité permet de répartir uniformément le poids du corps, limitant les points de pression et contribuant à la prévention des escarres. La découpe gaufrée **améliore la ventilation** et **réduit le cisaillement**, tandis que la mousse supporte jusqu'à **120kg** sans se déformer.

Cette combinaison de densité, résistance et ventilation assure un **repos stable**, sûr et confortable pour le patient, parfaitement adaptée aux environnements médicaux.

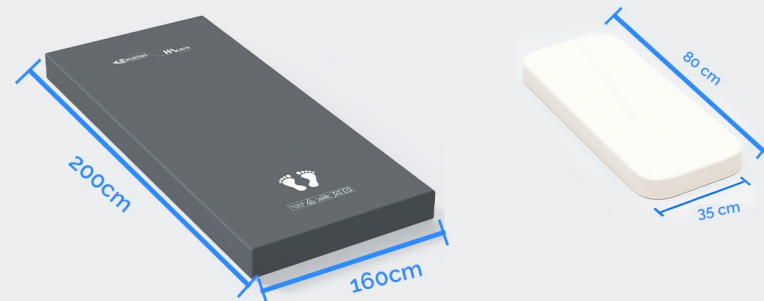

Dimensions

Le matelas est proposé dans un **grand choix de dimensions** afin de **s'adapter à tous les lits et aux différentes morphologies** des patients.

Cette variété assure un **maintien stable** et un **confort optimal**, tout en facilitant l'installation sur différents types de lits.

Chaque dimension est pensée pour favoriser la **sécurité et le bien-être** du patient, tout en répondant aux exigences des environnements médicaux.




Forme d'angles

Le matelas s'adapte à **tous les lits du marché** grâce à deux options d'angles.

Les **angles tronqués** sont disponibles pour **faciliter l'installation de potences**.

Les **angles droits**, offrent une **surface complète** pour un **confort maximal** et garantissent une **stabilité optimale** sur le sommier.

Cette flexibilité permet de répondre aux différents besoins des patients et du personnel, tout en combinant **confort et sécurité**.

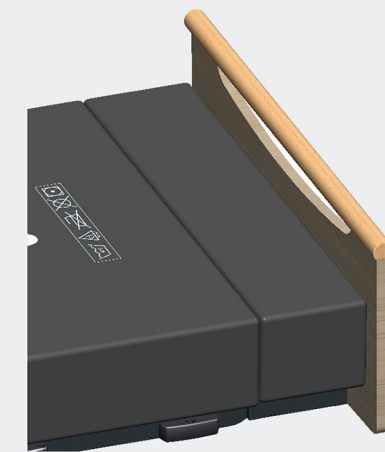

Rallonge de matelas

La rallonge de matelas **prolonge** le couchage tout en maintenant le **confort** et le **soutien** caractéristiques du matelas.

Elle **conserve** la répartition homogène des pressions, l'effet anti-cisaillement et la ventilation qui garantissent un bien-être optimal.

Facile à installer, elle permet au patient de bénéficier d'une surface de couchage étendue sans compromettre les propriétés bénéfiques du matelas, assurant un **maintien confortable** et **durable** sur toute la longueur du lit.

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids

15,5 kg

DIMENSIONS

Longueur

195 cm

Largeur

87 cm

Hauteur

17,5 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse

Polyuréthane Haute Résilience

Densité Mousse HR

35 kg/m3

Portance Mousse HR

3,4 kPa

Matière Housse

Dermalon

TYPE

Type de matelas

Matelas Gaufrier

Classe Matelas

Classe I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient

40 - 120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE


CE

CLASSEMENT FEU

Mousse

M4

200 | 090 | GA

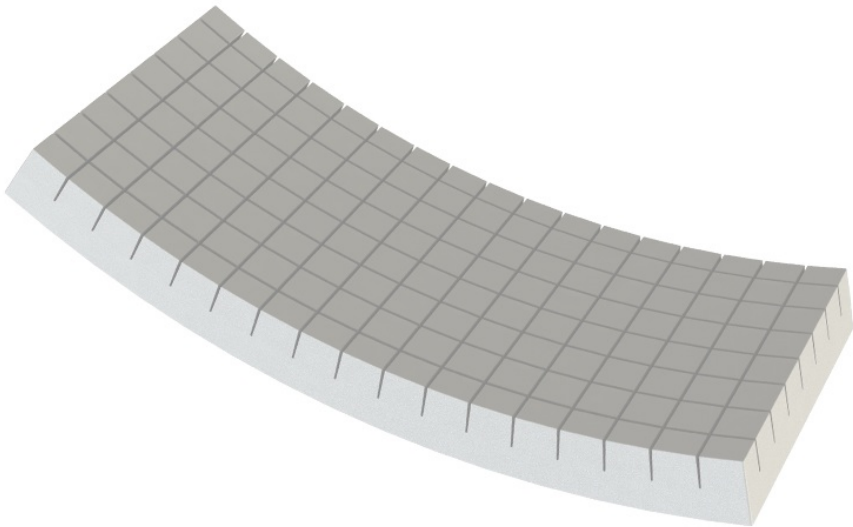

NOS POINTS FORTS

- Configurations dédiées
- Logistique optimisée



POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	15,5 kg
-------	---------

DIMENSIONS

Longueur	195 cm
Largeur	87 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	Alèse
Housse - Lavage en machine	90 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Matelas Gaufrier
Classe Matelas	Classe I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 120 kg
--------------------	-------------

RÈGLEMENTATION


Marquage CE	CE
-------------	----

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1

200 | 090 | GA

COMPRESSÉ

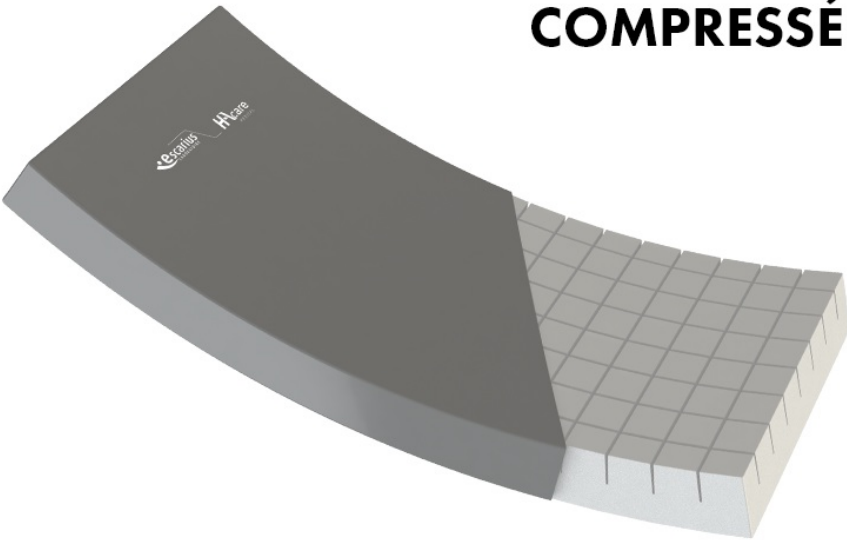

NOS POINTS FORTS

- Configurations dédiées
- Logistique optimisée





Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	16 kg
-------	-------

DIMENSIONS

Longueur	195 cm
Largeur	87 cm
Hauteur	14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Matelas Gaufrier
Classe Matelas	Classe I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 120 kg
--------------------	-------------

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE
-------------	----

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2


INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés
-------------	---------------------------------

AC-LX-M407-A-Y4

MATELAS + HOUSSE - GAUFRIER - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUES

200 | 090 | VI

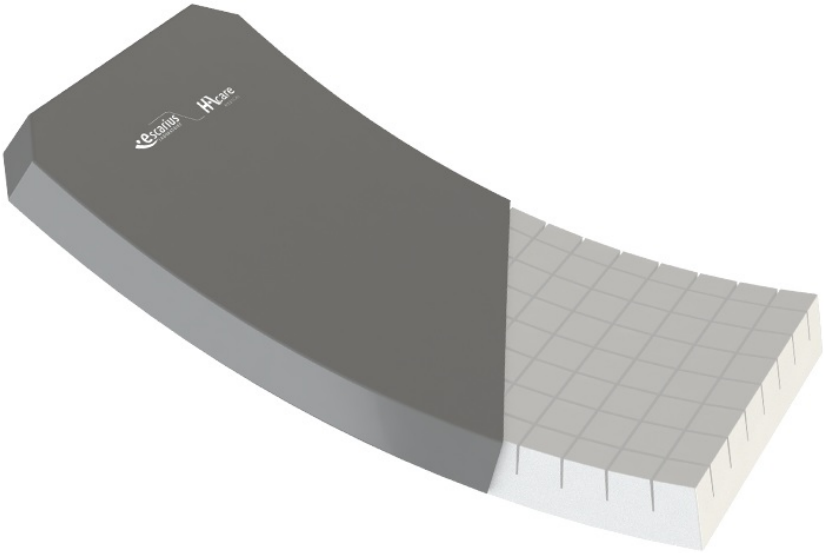

NOS POINTS FORTS

- Configurations dédiées
- Logistique optimisée





Spécificités techniques

AC-LX-M407-Y4

MATELAS + HOUSSE - GAUFRIER - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids16 kg

DIMENSIONS

Longueur195 cm
Largeur87 cm
Hauteur14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR35 kg/m3
Portance Mousse HR3,4 kPa
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasMatelas Gaufrier
Classe MatelasClasse I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CECE


CLASSEMENT FEU

MousseM4
HousseM1
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | GA

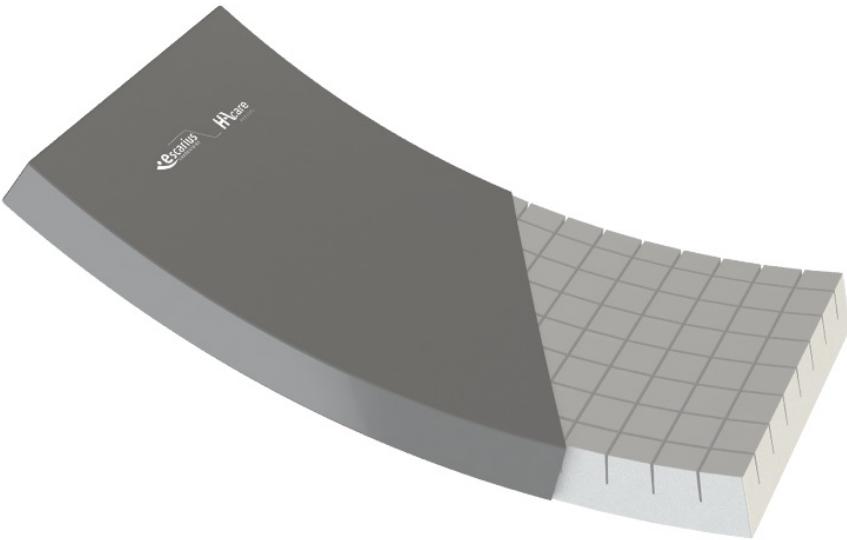

NOS POINTS FORTS

- Configurations dédiées
- Logistique optimisée




Une maintenance préventive qui s'adapte à vous


La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel

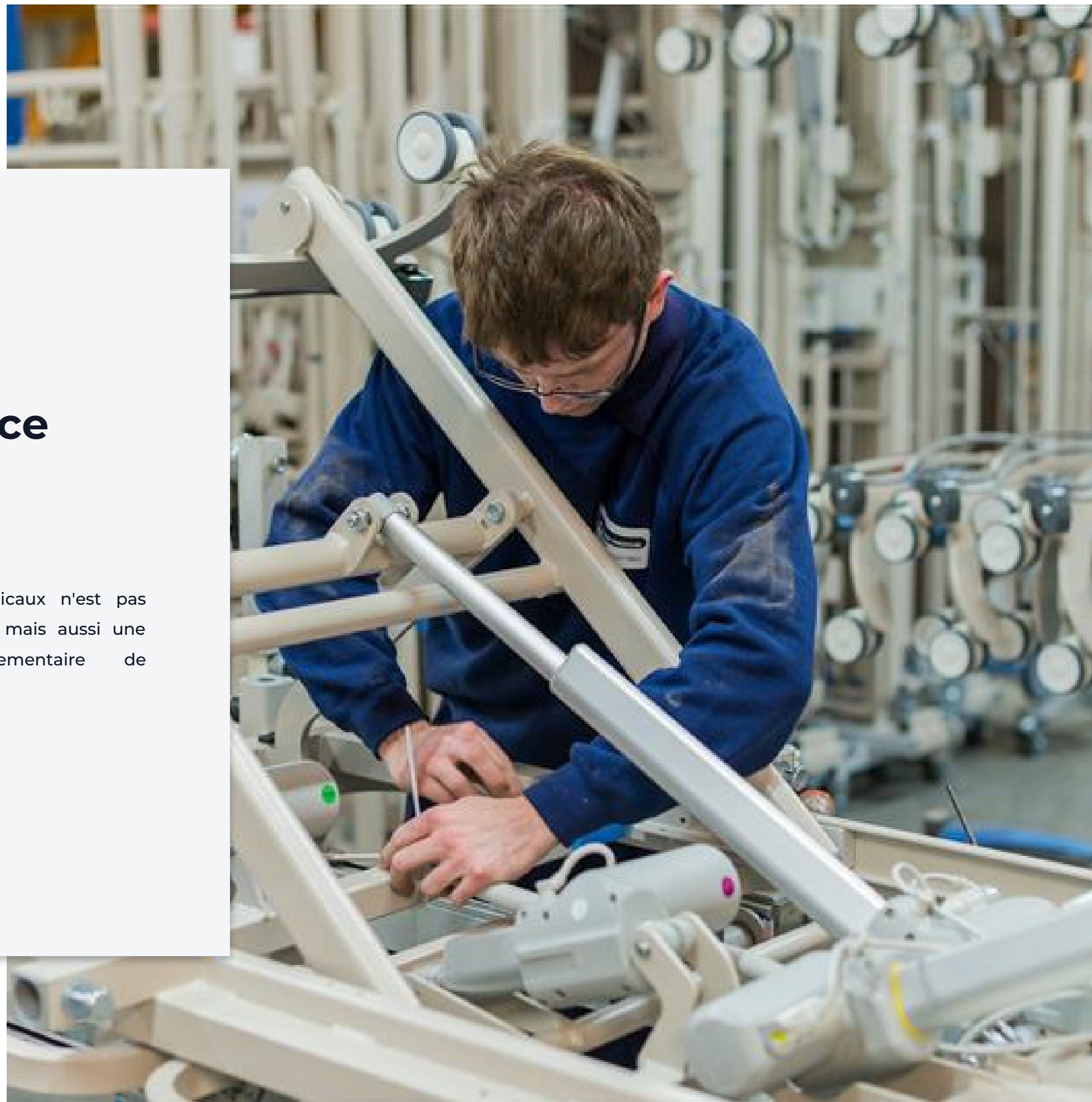

Les avantages de la maintenance préventive

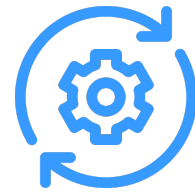

LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.



ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

Nos programmes de maintenance sont pensés pour :

- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
- Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
- Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
- Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.



UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

Nos solutions de maintenance vous aident à :

- Anticiper vos dépenses.
- Éviter les coûts imprévus.
- Optimiser vos investissements en toute transparence.



DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :

- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
- Le respect strict des normes réglementaires.
- La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

Nos prestations de maintenance préventive



UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :

- Un service réactif et de haute qualité.
- Une installation professionnelle de vos équipements.
- La formation complète de vos équipes, directement sur site.

NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

- Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
- Contrôle électronique : composants, commandes, capteurs.
- Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
- Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
- Tests électriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.

Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.

Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processus clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.



Z.A. La Fosse Neuve Route de Meslay
37210 - Parçay-Meslay

Tél +33 (0)2 47 88 58 85
clientfrance@hacare.com



Benoît LAMERANT
Responsable ventes France
b.lamerant@hacare.com
06 95 08 82 44



Administration des ventes
clientfrance@hacare.com
+33 (0)2 47 88 58 85



Laurent CARRET
Rhône Alpes
axis-agence@wanadoo.fr
04 72 00 89 42



Pauline CEPPE
Centre
p.ceppe@hacare.com
06 28 75 52 19



Pascal CHEVALIER
Auvergne
pascal.chevalier@bptc.fr
04 77 22 44 22



Yann DOMZALSKI
Hauts de France
y.domzalski@hacare.com
06 12 33 74 58



Julien FROMENT
Sud Est
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Julien FROMENT
Corse
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Benoît LAMERANT
Paris, île de France
b.lamerant@hacare.com
06 95 08 82 44




Julien LE BRUN
Bretagne
julien.le.brun@outlook.fr
06 62 47 46 28



Michaël MUNCH
Grand Est
m.munch@nexusicare.fr
06 17 17 10 64



Julien REDAUD
Sud Ouest
j.redaud@rj-sante.fr
06 62 92 58 66

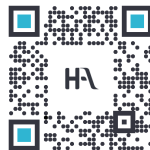

HAcare
MEDICAL

1860



MKT-26-PO-HEB-CHA-SMR-STH-GAU-FR
2026